




美国夏普特眼科手术刀目录

SharpPoint Ophthalmic Product Catalog



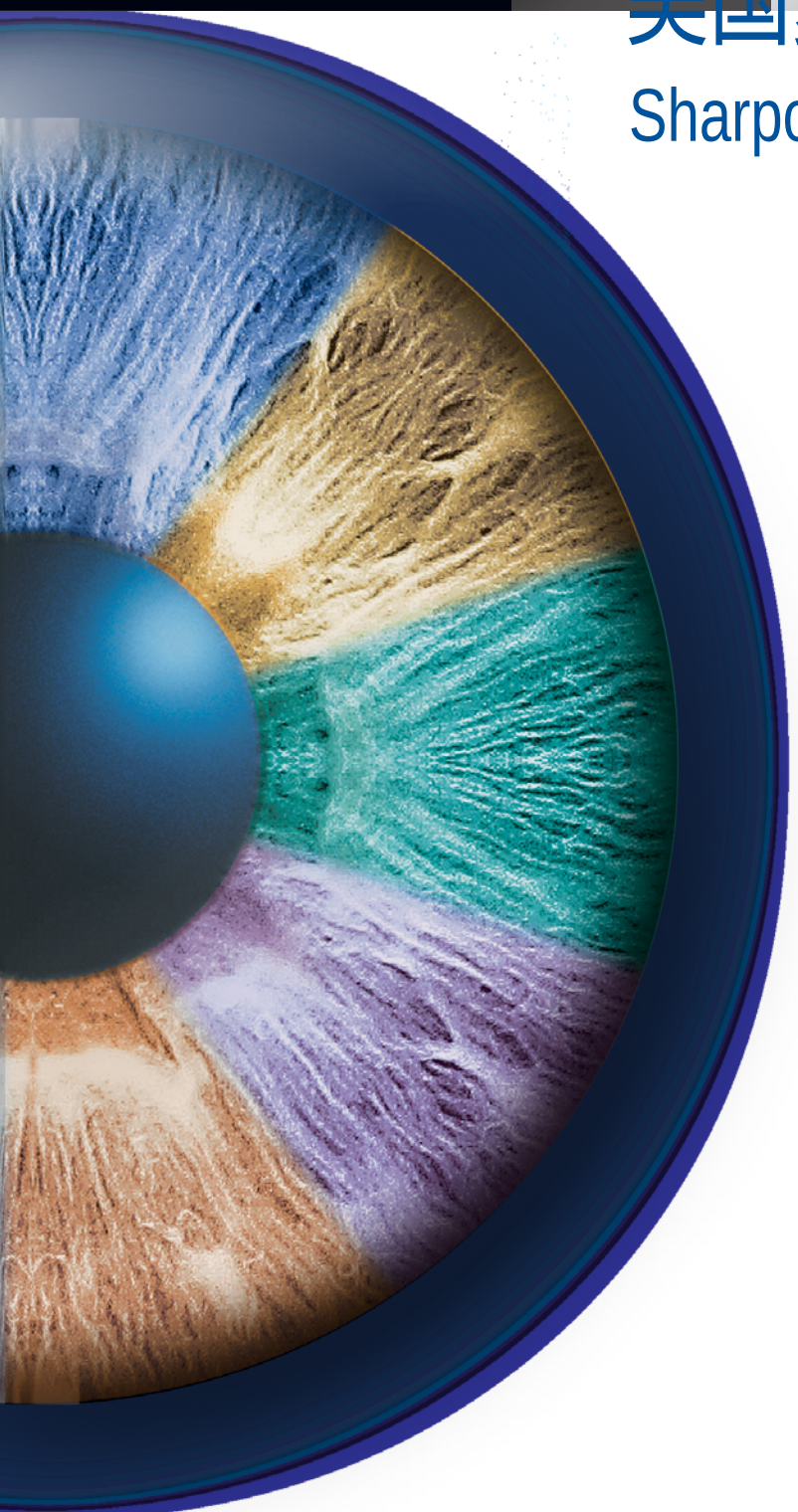

2010 Ophthalmic Product Catalog

www.Sharpoint.com

877 991-1110 • 732 626-6466

眼科手术刀

SharpGuard TM 带安全刀鞘手术刀	1
---	---

穿刺刀

ClearPort TM 穿刺刀	2
Stab 穿刺刀	2

角膜缘隧道松弛切口刀

精密深度刀	3
限制深度刀	3

超乳切口刀

IQ几何刀 TM 单面上斜面	4
IQ几何刀 TM ClearTrap TM 单面上斜面	4
透明角膜切口刀 双斜面	5
透明角膜切口刀 双斜面 平行面	5
裂隙刀 单面上斜面	6
裂隙刀 双斜面	6
裂隙刀 上斜面 平行面	7
裂隙刀 单斜面	7

超乳切口/植入刀

ClearTrap TM 梯形透明角膜/植入刀 斜面向上	8
Pilot Tip TM 植入刀 上斜面	9
植入刀 上斜面	9

月形隧道刀

Sharptome TM 月形隧道刀	10
迷你月形隧道刀	10

波切穿刺刀

波切穿刺刀	11
-------------	----

特殊刀

匙形刀 双斜面	11
特殊刀	12
刀片和刀柄	12

Guarded



- ▶ 保护套设计是为了消除和减少创伤
- ▶ 刀片性能优异
- ▶ 符合人体工程学设计的刀柄使操作精确并舒适
- ▶ 目前作为OSHA暴露控制计划的部分评价指标

SharpGuard™ 手术刀具有滑动的保护套，代表了 Sharpoint 手术刀的最高水平。目前种类包括穿刺刀、裂隙刀、透明角膜刀和月形隧道刀。每盒5把。



使用方法



手术刀	描述
72-1501G	15° 穿刺刀 直头 带保护套




72-2763G	2.75mm	透明角膜刀 弯头 双面刃 带保护套
72-2863G	2.85mm	透明角膜刀 弯头 双面刃 带保护套




72-2231G	2.2mm	裂隙刀 弯头 双面刃 带保护套
72-2431G	2.4mm	裂隙刀 弯头 双面刃 带保护套
72-2561G	2.5mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套
72-2661G	2.65mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套
72-2761G	2.75mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套
72-2861G	2.85mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套
72-2961G	3.0mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套
72-3261G	3.2mm	裂隙刀 弯头 单面刃 带保护套




74-1010G	2.0mm	月形隧道刀 弯头 单面刃 带保护套
-----------------	-------	-------------------

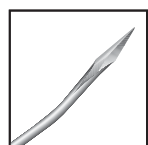

78-2010G	1.1mm	ClearPort™ 穿刺刀 弯头 带保护套
-----------------	-------	------------------------

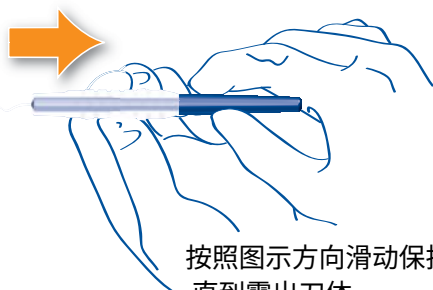

按照图示方向滑动保护套
直到露出刀体

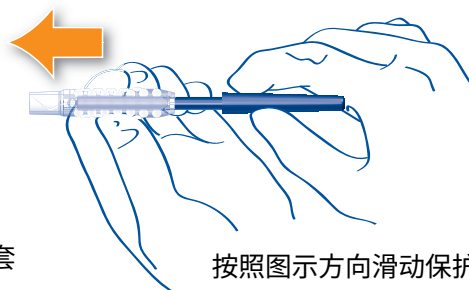

按照图示方向滑动保护套
直到刀体退回


If you would like to place an order or require assistance cross-referencing one of our products,
please call our Customer Care Center at 877 991-1110 (USA and Canada only) or 732 626-6466 or fax us at 610 404-4010.

www.Sharpoint.com

穿刺手术刀

ClearPort™ 穿刺手术刀


Sharpoint™ ClearPort™ 手术刀便于制作连续、准确、自行闭合的穿刺切口，每盒6把。

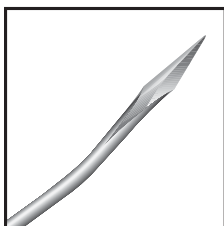


手术刀	刀片/刀头	描述
78-2510	•	0.6mm 弯头
78-2310	•	0.8mm 弯头
78-2010	•	1.1mm 弯头
78-2010G	•	1.1mm 弯头
78-2019	•	1.4mm 弯头, 1.0mm标识线

穿刺手术刀


Sharpoint™ 穿刺刀擅于在初始切口处提供一个强而准确并易于穿透的点，每盒6把。

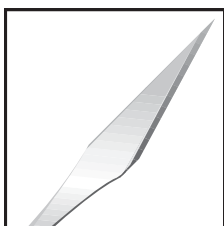

手术刀	刀片/刀头	描述
72-1501	72-1502	15° 直头
72-1501G	•	15° 直头
72-1591	•	15° 右弯头
72-2201	72-2202	22.5° 直头
72-3001	72-3002	30° 直头
72-4501	72-4502	45° 直头

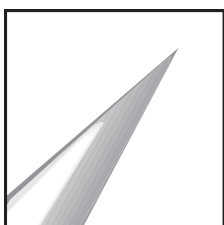

手术刀	刀片/刀头	描述
72-1531	72-1532	15° 3.0mm 直头 受限的刀片深度
72-1551	72-1552	15° 5.0mm 直头 受限的刀片深度
72-3036	•	30° 3.5mm 直头 受限的刀片深度

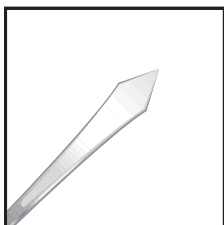


手术刀	刀片/刀头	描述
72-1001	•	1.0mm 穿刺刀 直头 单斜面

角巩膜缘松解切口手术刀

精确深度手术刀


Sharpoint™ 精确深度手术刀可用于制作精确的巩膜缘松解切口。单一形状设计可保证精确性。双面刀刃可做左右两个方向的切口。每盒6把。

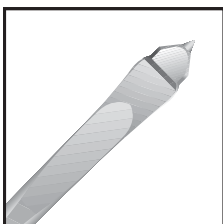

手术刀	刀片/刀头	描述
72-0303	•	300 μm 直头 全刀柄
72-3503	•	350 μm 直头 全刀柄
72-0503	•	500 μm 直头 全刀柄
72-5503	•	550 μm 直头 全刀柄
72-6003	•	600 μm 直头 全刀柄

受限深度手术刀

Sharpoint™ 精确深度手术刀可用于制作精确的巩膜缘松解切口。单一形状设计可保证精确性。双面刀刃可做左右两个方向的切口。每盒6把。

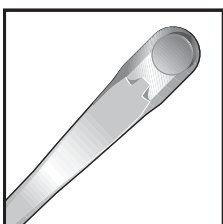

手术刀	刀片/刀头	描述
72-0301	•	300 μm 直头 全刀柄
72-0401	•	450 μm 直头 全刀柄

超乳手术刀

IQ Geometry™ 手术刀

超越标准手术刀的革命性设计

◀ 中空的弯头设计

最少的组织接触，减少穿透阻力

◀ 厚度减少40%


相比标准刀产生更优越的创口结构

◀ Uses Sharpoint™ Infinite Edge™

专利技术


Penetration Improvement Affected by IQ Technology™

IQ Geometry™ Knife vs. Sharpoint™ Standard Knife

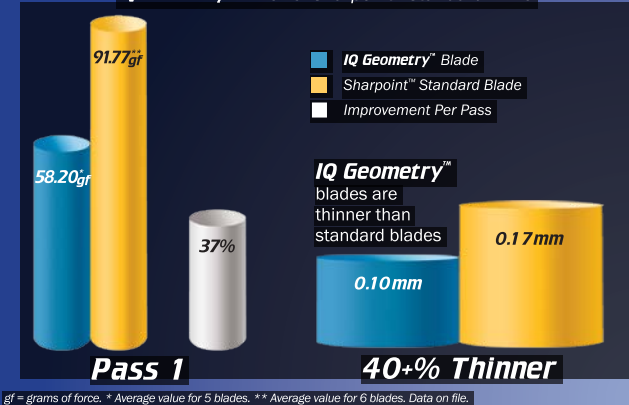

IQ Geometry™ 裂隙刀 单面刃

Sharpoint™ IQ Geometry™ 裂隙刀的革命性边缘设计与组织形成两个接触点，更薄的刀片减少了穿透阻力。每盒6把。

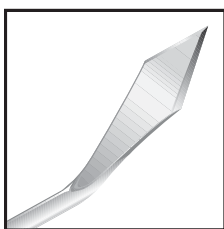

手术刀

刀片/刀头

描述

72-1540

•

1.5mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2040

•

2.0mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2240

•

2.25mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2540

•

2.5mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2640

•

2.65mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2740

•

2.75mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-2840

•

2.85mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-3040

•

3.0mm 弯头 全刀柄 单面刃

72-3240

•

3.2mm 弯头 全刀柄 单面刃

IQ Geometry™ ClearTrap™ 手术刀 单面刃

Sharpoint™ IQ Geometry™ ClearTrap™ 裂隙刀的革命性边缘设计与组织形成两个接触点，更薄的刀片减少了穿透阻力。其梯形设计连同拥有专利的宽度指示线提供了一种超声乳化和植入合二为一的手术刀，每盒6把。



手术刀

刀片/刀头

描述

77-1214

•

1.2 - 1.4mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

77-1517

•

1.5 - 1.7mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

77-1725

•

1.7 - 2.2 - 2.5mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

77-2723

•

2.75 - 3.0mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

77-2724

•

2.75 - 3.2mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

77-2824

•

2.85 - 3.2mm 弯头 全刀柄 宽度指示线

透明角膜超声乳化手术刀

◀ 优异的切口结构

锥形斜面设计易于切割组织，形成更易自闭的笔直切口

◀ 刀片外观


更薄的刀片设计可减少对散光影响并促进再上皮化。

短刀片设计降低组织损伤风险。


◀ 独特的专利型宽度/深度标识线

1.5mm 1.75mm 2.0mm作为改变平面时制作切口的视觉参照。

Clear Corneal Knife - Top View

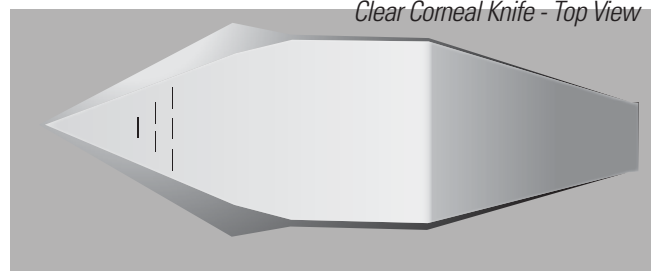


Clear Corneal Knife - Bottom View

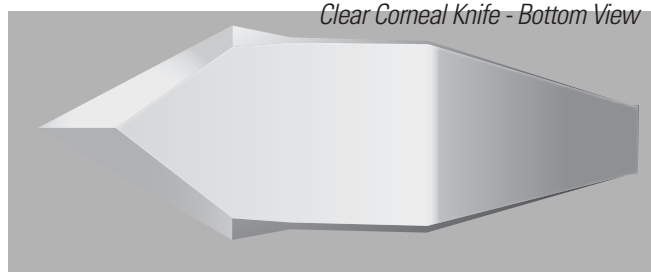

透明角膜手术刀 双面刃


Sharpoint™ 透明角膜手术刀的锥形切面边缘设计可补偿角膜曲率，制作精确的线性切口。独特的薄刀片设计和持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形的切口。每把刀片上都有专利设计的切口宽度/深度指示线（1.5mm, 1.75mm, 2.0mm）。

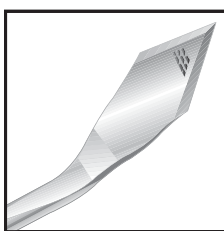

手术刀	刀片/刀头	描述
72-1361	•	1.3mm 弯头 双面刃 1.0mm宽度指示线
72-1661	•	1.6mm 弯头 双面刃 1.4mm宽度指示线
72-2663	•	2.65mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-2763	•	2.75mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-2763G	•	2.75mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-2863	•	2.85mm 弯头 双面刃 宽度深度指示线
72-2863G	•	2.85mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-3061	•	3.0mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-3263	•	3.2mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线

透明角膜手术刀 双面刃 平行侧面

Sharpoint™ 带有平行侧面设计的透明角膜手术刀有中央切面边缘并有侧切能力。独特的薄刀片设计和持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形切口。每把刀上都有专利设计的切口宽度/深度指示线（1.5mm, 1.75mm, 2.0mm）。每盒6把。

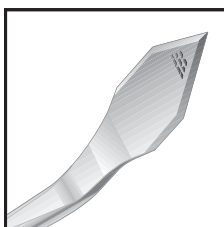


手术刀	刀片/刀头	描述
72-2635	•	2.65mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-2735	•	2.75mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-2835	•	2.85mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-3035	•	3.0mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线
72-3235	•	3.2mm 弯头 双面刃 宽度/深度指示线

超声乳化手术刀

裂隙手术刀 单面刃


Sharpoint™ 弯头、单面刃裂隙手术刀穿透力强，产生的精确切口最适合超声乳化头所需的宽度。每盒6把。

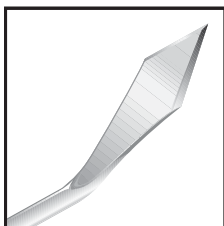

手术刀	刀片/刀头	描述
72-2561	72-2562	2.5mm 弯头 单面刃
72-2561G	•	2.5mm 弯头 单面刃
72-2661	72-2662	2.65mm 弯头 单面刃
72-2661G	•	2.65mm 弯头 单面刃
72-2761	72-2762	2.75mm 弯头 单面刃
72-2761G	•	2.75mm 弯头 单面刃
72-2861	72-2862	2.85mm 弯头 单面刃
72-2861G	•	2.85mm 弯头 单面刃
72-2961	72-2962	3.0mm 弯头 单面刃
72-2961G	•	3.0mm 弯头 单面刃
72-3261	72-3262	3.2mm 弯头 单面刃
72-3261G	•	3.2mm 弯头 单面刃
72-3561	•	3.5mm 弯头 单面刃
72-5163	•	5.1mm 弯头 单面刃

裂隙手术刀 双面刃

Sharpoint™ 双面刃裂隙手术刀容易制作精确宽度的切口，几乎不会产生组织牵拉或变形。每盒6把。

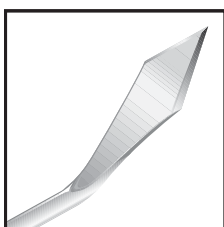


手术刀	刀片/刀头	描述
72-2231	•	2.2mm 弯头 双面刃
72-2231G	•	2.2mm 弯头 双面刃
72-2431	•	2.4mm 弯头 双面刃
72-2431G	•	2.4mm 弯头 双面刃
72-2531	•	2.5mm 弯头 双面刃
72-2631	•	2.65mm 弯头 双面刃
72-2831	•	2.8mm 弯头 双面刃
72-2931	•	3.0mm 弯头 双面刃
72-3231	•	3.2mm 弯头 双面刃
72-3270	•	3.2mm 70度弯头 双面刃
72-3531	•	3.5mm 弯头 双面刃

超声乳化手术刀

裂隙手术刀 单面刃 平行侧边


Sharpoint™ 具有平行侧边的裂隙手术刀特点是单面刃设计，能够进行侧切。每盒6把。

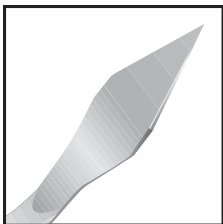

手术刀	刀片/刀头	描述
72-2912	72-2913	3.0mm 弯头 单面刃
72-3212	•	3.2mm 弯头 单面刃

裂隙手术刀 单面刃

Sharpoint™ 裂隙手术刀穿透力强，制作的精准切口最适合超声乳化头的宽度。

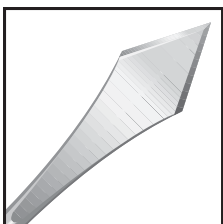

手术刀	刀片/刀头	描述
72-2801	•	2.85mm 直头
72-2901	•	3.0mm 直头
72-3201	•	3.2mm 直头

If you would like to place an order or require assistance cross-referencing one of our products,
please call our Customer Care Center at 877 991-1110 (USA and Canada only) or 732 626-6466 or fax us at 610 404-4010.

www.Sharpoint.com

超声乳化/植入手术刀

◀ 梯形设计

超声乳化和植入手术刀合二为一

◀ 稳定性


允许医生为植入人工晶体而扩大超乳切口到稳定的精确的宽度

◀ 创口完整性

通过弃用植入刀保持创口完整性

◀ 指示线

超乳和植入手术刀上的专利宽度指示线作为视觉参照的标记

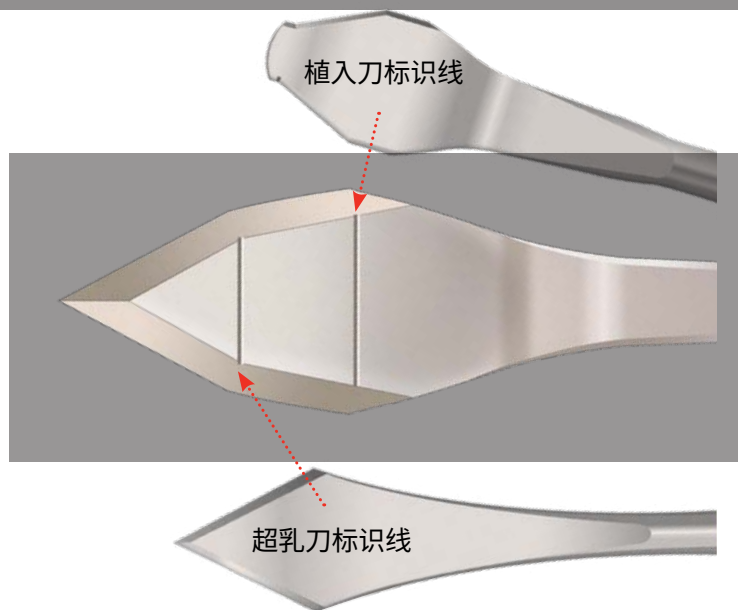

ClearTrap™ 梯形透明角膜/植入手术刀 单面刃

Sharpoint™ ClearTrap™ 手术刀具有梯形设计，每把刀上都有专利性的宽度指示线。独特的薄刀片设计和稳定的锋利度制作切口时几乎不会出现组织牵拉或变形。每盒6把。




手术刀	刀片/刀头	描述
75-1214	•	1.2 - 1.4mm 弯头 宽度指示线
75-1517	•	1.5 - 1.7mm 弯头 宽度指示线
75-1520	•	1.5 - 2.0mm 弯头 宽度指示线
75-1720	•	1.7 - 2.0mm 弯头 宽度指示线
75-2522	•	2.5 - 2.9mm 弯头 宽度指示线
75-2524	•	2.5 - 3.2mm 弯头 宽度指示线
75-2723	•	2.75 - 3.0mm 弯头 宽度指示线
75-2724	•	2.75 - 3.2mm 弯头 宽度指示线
75-2725	•	2.75 - 3.5mm 弯头 宽度指示线
75-2726	•	2.75 - 3.75mm 弯头 宽度指示线
75-2824	•	2.85 - 3.2mm 弯头 宽度指示线
75-2825	•	2.85 - 3.5mm 弯头 宽度指示线
75-2826	•	2.85 - 3.75mm 弯头 宽度指示线
75-2925	•	3.0 - 3.5mm 弯头 宽度指示线
75-3225	•	3.2 - 3.5mm 弯头 宽度指示线

植入手术刀

Pilot Tip™ 植入手术刀 单面刃


Sharpoint™ Pilot Tip™ 植入手术刀可轻松通过裂隙刀切口，其刀刃可制作晶体植入的准确切口。每盒6把。

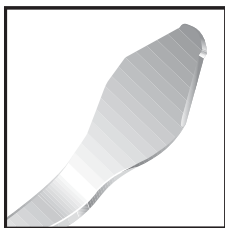

手术刀	刀片/刀头	描述
76-5361	•	3.2mm 弯头 单面刃
76-3461	•	3.5mm 弯头 单面刃
76-3761	•	3.75mm 弯头 单面刃
76-5161	•	5.2mm 弯头 单面刃
76-5561	•	5.5mm 弯头 单面刃
76-6061	•	6.0mm 弯头 单面刃

植入手术刀 单面刃

Sharpoint™ 标准手术刀用于扩大原来的切口方便晶体植入。每盒6把。

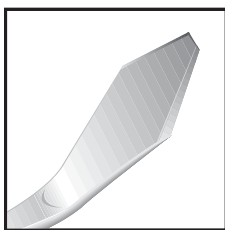


手术刀	刀片/刀头	描述
76-4061	•	4.0mm Angled, bevel-up
76-5261	•	5.2mm Angled, bevel-up


月形隧道刀

Sharptome™ 月形隧道刀

Sharpoint™ Sharptome™ 月形隧道刀用于制作顺滑的巩膜隧道以促进创口愈合。刀片持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉或变形。每盒6把。

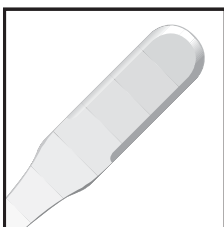


手术刀	刀片/刀头	描述
74-1000	74-5000	2.0mm 直头

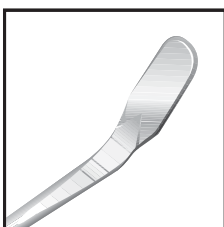

手术刀	刀片/刀头	描述
74-1010	74-5062	2.0mm 弯头 单面刃
74-1010G	•	2.0mm 弯头 单面刃
74-1020	•	2.0mm 弯头 单面刃 (朝下)
74-1031	•	2.0mm 弯头 双面刃

迷你月形隧道刀

Sharpoint™ 迷你月形隧道刀用于制作一个更小的巩膜隧道。刀片持续的锋利度几乎不会造成组织牵拉及变形。每盒6把。

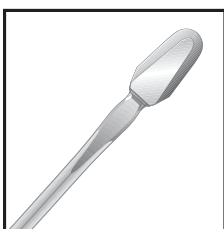


手术刀	刀片/刀头	描述
74-6910	•	1.25mm 弯头 双面刃


波切手术刀

波切手术刀

SharpPoint™ 波切手术刀用于制作小而准确的切口，基本上可消除探针及其他后节器械周边的创口渗出，每盒6把。

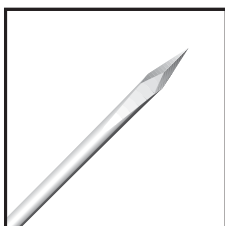

手术刀	刀片/刀头	描述
71-1901	•	19 gauge 直头
71-2001	•	20 gauge 直头
71-2301	•	23 gauge 直头
71-2501	•	25 gauge 直头

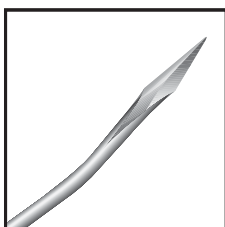


手术刀	刀片/刀头	描述
71-2061	•	20 gauge 弯头

特殊手术刀

匙形手术刀 双面刃

SharpPoint™ 匙形刀具有独特的320度切割半径和超薄刀片，在多方向操作技术应用时可提高其切割精确性。每盒6把。

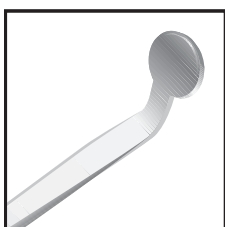

手术刀	刀片/刀头	描述
74-2261	•	2.2mm 弯头 双面刃
74-3061	•	3.0mm 弯头 双面刃

If you would like to place an order or require assistance cross-referencing one of our products,
please call our Customer Care Center at 877 991-1110 (USA and Canada only) or 732 626-6466 or fax us at 610 404-4010.

www.SharpPoint.com

特殊手术刀

Sharpoint™ 特殊手术刀为不同操作技术和手术提供多种形状和型号。每盒6个。



手术刀	刀片/刀头	描述
78-6810	•	针形刀 直头 4.0mm刀刃



手术刀	刀片/刀头	描述
•	78-5700	巩膜刀 直头



手术刀	刀片/刀头	描述
•	78-6600	2.3mm 薄层刀 弯头 单面刃



手术刀	刀片/刀头	描述
•	78-6900	微型刀 直头 双面刃 周身锋利

刀片和刀柄

Sharpoint™ 不锈钢刀片和刀柄同 Sharpoint™ 带螺纹的刀片和其他配套是一致的。内部的标准化螺纹适用于大部分市面上可见的夹头和刀片。单独购买。



刀柄	描述
92-9000	9.5cm 长度
92-9003	16.5cm 长度

www.Sharpoint.com
877 991-1110 • 732 646-6466



Angiotech, 100 Dennis Drive, Reading, PA 19604 • Tel: 732 626-6466 • 877 991-1110 (USA and Canada only) • Fax: 610 404-4010 • info@angiotech.com
SHARPOINT™, THE SURGEONS EDGE™, CLEARPORT™, CLEARTRAP™, DERMAGLIDE™, EYE GARTER™, EASY SHIELD™, INFINITE EDGE™, IQ GEOMETRY™, IQ TECHNOLOGY™, M.E.T.™, PILOT TIP™, POLYSYN™, POLYSYN FA™, POLYVIOLENE™, SHARPGUARD™, SHARPTOME™, ULTRAGLIDE™, ULTRAFIT™, ULTRAPLUG™, and V-CANN™ are trademarks of Surgical Specialties Corporation.
ETHICON™, VICRYL™, PERMAHAND SILK™, ETHILON™, MERSILENE™, and PROLENE™ are trademarks of Johnson and Johnson Company.
SYNETURE™, POLYSORB™, DEXON™, SOFSILK™, MONOSOF™, DERMALON™, SURGIDAC™, SURGIPRO™ and SURGILENE™ are trademarks of Covidien.
©2010 Angiotech Pharmaceuticals, Inc. ©2001 - 2010 Surgical Specialties Corporation. All Rights Reserved.

Sharpoint™
The Surgeon's Edge™

